



# DENTASEPT®

## Aspiration AF+

### KULLANIM ALANLARI

Dentasept® Aspiration AF + her çeşit suction sistemlerinin, amalgam ayırıcıları ve tükürük hokkalarının günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için geliştirilmiş yüksek performanslı, konsantre sıvı solüsyon.

### AVANTAJLARI

- ✓ Köpürmez
- ✓ Üçlü etki - temizleme, dezenfeksiyon, koku giderme
- ✓ Kireç çözücü madde içermektedir.
- ✓ Oldukça ekonomik %2 sulandırma -5 litre konsantre üründen 250 litre kullanıma hazır solüsyon.
- ✓ Sadece 15 dakikada - Tüm zarflı virüslere karşı etkin<sup>1</sup>
- ✓ Tıbbi Cihaz Sınıf IIa (Modifiye edilmiş 93/42/EEC Direktifi)

<sup>1</sup> \*RKI: Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için ""sınırlı virüsidal etkinlik""(begrenzt viruzid wirksam)aktivitesi olan dezenfektanların kullanılmasını önerir. RKI'ye göre sınırlı virüsidal etkinlik vacciniavirüs ve BVDV'ye karşılık gelmektedir.\*

### MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bakterisit: EN 1040, EN13727, EN 14561 - 15 dakika  
Yeastisit: EN 1275, EN13624, EN 14562 - 15 dakika  
Tüberkülosit: EN 14348, EN 14563 - 60 dakika  
EN 14476'ya göre Herpes virüs, BVDV (HCV model virüs),  
Vaccinia virüs'e karşı etkin - 5 dakika

### KİMYASAL İÇERİK

N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1,3-diamin, sürfektanların birlikteliği, kompleks yapıcı ajan, renklendirici ve ekspiyenler.

### AMBALAJ VE AKSESUARLAR

1 litre şişe - doz ayarlama kısmı ile birlikte  
5 litre bidon - doz pompası ile birlikte  
Dentasept® ASP System (424050)



(424050)



ASPIRATION

# DENTASEPT® Aspiration AF+

## KULLANIM TALİMATI


Dentasept® Aspiration AF+ her çeşit suction sistemlerinin, amalgam ayırıcıları ve tükürük hokkalarının günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için geliştirilmiş yüksek performanslı, konsantre sıvı solüsyon.

### KULLANIM ÖNCESİ

Uygun eldiven kullanınız.

### KULLANIMI

- 1 Gün sonunda 2 litrelik solüsyonu Dentasept®ASP System ile hazırlayın  
%2 dilüsyon (2 litre suya 40 ml)  
1 litre şişe: Doz ayarlayıcısının göstergesini 20ml seviyesine getirin ve bu işlemi tekrar edin  
5 litre bidon: 2 pompa basımı
- 2 Dentasept®ASP System'i solüsyonun karışması için yavaşça çalkalayınız.
- 3 Dentasept® ASP System'i vakum sistemine bağlayınız ve sulandırılmış solüsyonu aspire ediniz.
- 4 Etkinliği için en az 15 dakika temas süresi gereklidir. gece boyunca solüsyon sistemde bırakılabilir.
- 5 İşlemi tamamlamak için Dentasept® ASP System'i en az 1 litre temiz suyla doldurularak aspire edilmelidir.

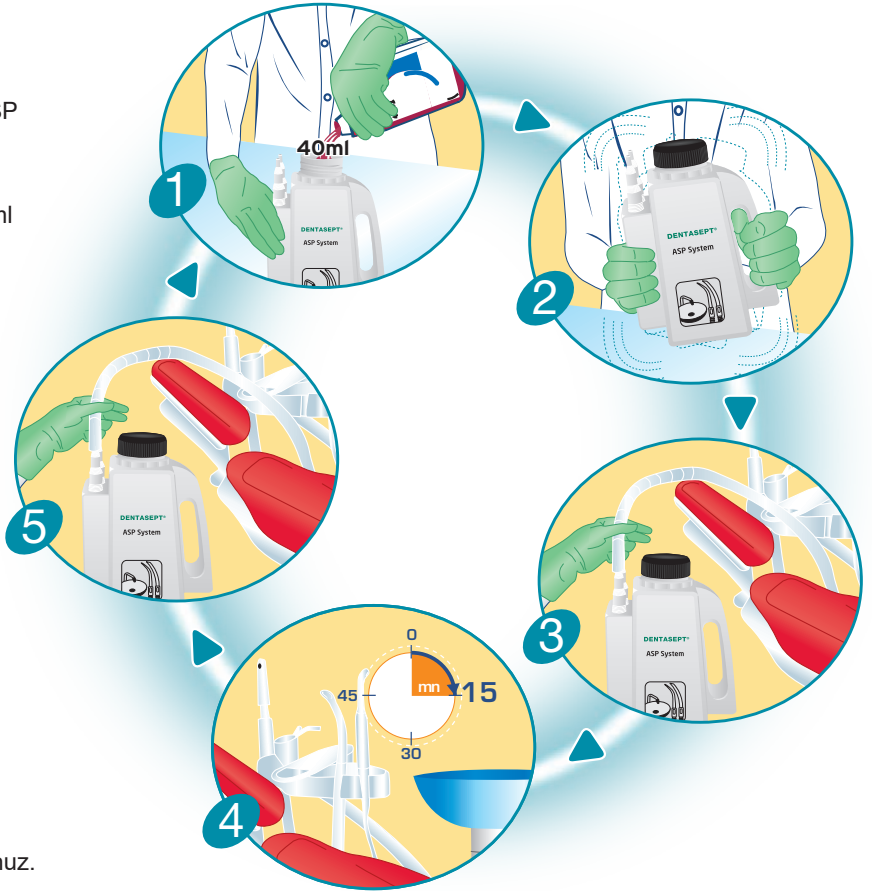

### UYARILAR

Tehlikeli-kullanım önlemlerine uyunuz.  
Tıbbi Cihaz Sınıf IIa, CE 0459  
Kullanmadan önce etiket üzerindeki bilgileri okuyunuz.  
+5°C ile +35°C aralığında saklayınız.

Üretici firma: D.M.D.  
Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMMES  
Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com  
İthalatçı firma: ANIOS DEZENFEKTAN TİC. VE SAN. A.Ş.  
Melek Aras Bulvarı Aromatik cd. no:59/3 - 34956 TUZLA - İSTANBUL  
Tel:+90 (216) 347 55 52 Faks:+90 (216) 326 38 69 www.anios.com.tr