

Diř Hekimlięi Fakülteleri, Hastaneleri, Aęız ve Diř Saęlıęı Merkezleri ve Poliklinikler İin MERKEZİ DENTAL KOMPRESÖRLER



Merkezi Dental Kompresör ve Aspiratör Sistemleri Teknik Alt Yapı Uygulamaları 1994 Yılından Bu Yana DMS Güvencesi İle TÜRKİYE'de

DMS Marka Merkezi Dental Kompresör ve Aspiratör Sistemleri Teknik Altyapı Uygulamaları



Merkezi Dental Kompresör ve Aspiratör Sistemleri Teknik Altyapı Uygulamaları



Referanslar;

Danışmanlık, proje, uygulama ve cihaz tedarikleri süreçlerinin tamamı ile gerçekleştirilmiş olup **DMS** tarafından sağlanan Emek ve Alın teri ile bütünleşmiştir.

Ülkemizde 1980 yılından bu yana her ölçekteki diş hekimliği eğitim ve hizmet birimlerinin danışmanlık, planlama, projelendirme ve nitelikli teknolojiler ile uygulama hizmetlerini mevzuat ve standartlar çerçevesinde güvenli teknik alt yapı uygulaması ile gerçekleştiren


önder kuruluştur

Kuruluşumuzdan bu güne binlerce muayenehaneye ürün ve hizmet desteği verirken özellikle muayenehane teknik altyapılarının önemini vurgulayarak hijyen teknolojileri ve çalışma güvenliği bilincini geliştirmeye yönelik sektör gündeminin

ön sıralarında olduk



MERKEZİ DENTAL PİSTONLU KOMPRESÖR

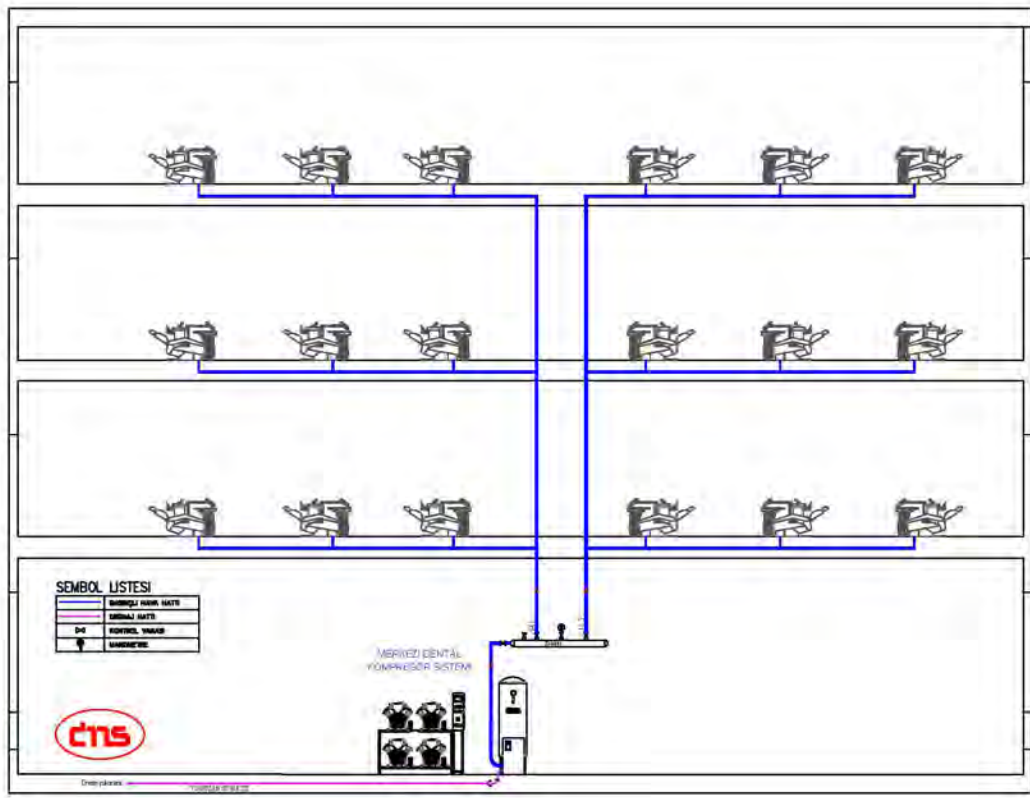

MERKEZİ DENTAL KOMPRESÖR SİSTEMİ AKIŞ ŞEMASI



YAĞSIZ, NEMSİZ, %100 DENTAL HAVA

DENTAL GEREKSİNİMLERİ SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ VE ÖZGÜN TASARIM

Yağsız ve Nemsiz %100 Dental Hava

Yüksek kapasiteli fakültelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, Diş hastanelerinin basınçlı hava konusunda yüksek talepleri bulunmaktadır. Bu talepleri, yalnızca güvenilir, yüksek verimlilikte çalışan merkezi kompresör sistemleri karşılayabilir. DMS Merkezi Kompresör Sistemleri yüzlerce diş tedavi üniteleri için gereken basınçlı havayı tek bir kaynaktan sağlayan soğutucu tipli kurutucu ve siklon seperatörlü ileri teknoloji merkezi kompresör sistemlerine sahiptir.

AVANTAJLARI


- Güvenilir ve yüksek basınçlı hava.
- Yağsız kuru ve hijyenik
- Montaj ve kurulum kolaylığı
- Kapasiteye uygun özel planlama
- Periyodik bakım ve servis kolaylığı
- Rutubetli ortama karşı korozyon dayanımı
- Güvenilir servis ve yedek parça

Teknik Veriler


DP 8020-20 SERİSİ KLİNİK KOMPRESÖR SİSTEMLERİ	DP 8020-20 2/4-660	DP 8020-20 3/6-660	DP 8020-20 4/8-660	DP 8020-20 2/4-930	DP 8020-20 3/6-930	DP 8020-20 4/8-930
MOTOR SAYISI	2	3	4	2	3	4
VOLTAJ (V)	400 V (3~)	400 V (3~)	400 V (3~)	400 V (3~)	400 V (3~)	400 V (3~)
FREKANS (Hz)	50	50	50	50	50	50
GÜÇ DEĞERLERİ (Kw)	11	16,5	22	15	22,5	30
Akım (A)	23,8	35,7	47,6	28,4	42,6	56,8
ÜRETİLEN HAVA (LİT./DAK.)	1320	1980	2640	1860	2790	3720
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
BASINÇLI HAVA TANKI KAPASİTESİ (LİTRE)	500	500	500	500	500	500
EMNİYET VALFİ DEVREYE GİRME BASINCI (BAR)	10	10	10	10	10	10
KURUTUCU TİPİ	GAZLI TİP SOĞUTMA PRENSİBİ					
KURUTMA KAPASİTESİ CM ₃	150 - 210					
SES SEVİYESİ dB(A)	88	91	93	89	92	94
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %100	30	45	60	40	65	85
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %60	50	75	100	70	105	140

*Ses seviyesi çalışma ortamının akustik durumuna bağlı + - 3 dB(A) farklılık yaratabilir.


DP 8020-20 SERİSİ MERKEZİ DENTAL KOMPRESÖR MODELLERİ

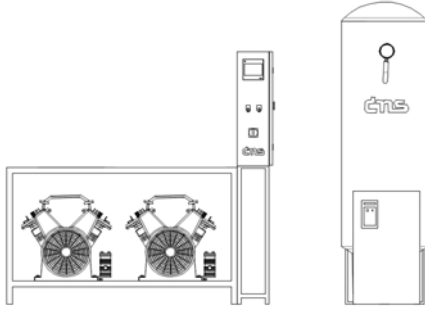


DP 8020-20 2/4-660

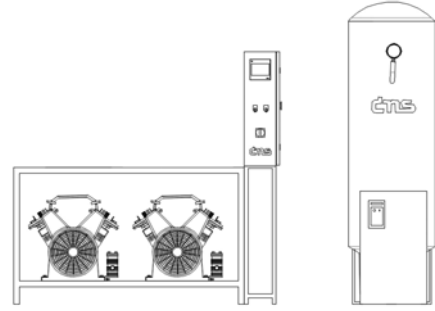


DP 8020-20 2/4-930

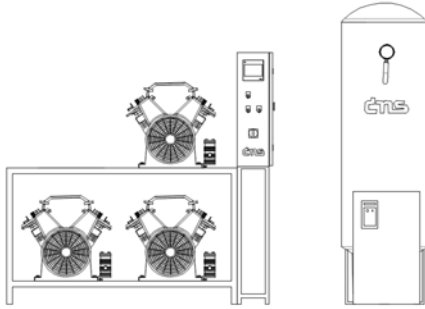


DP 8020-20 3/6-660

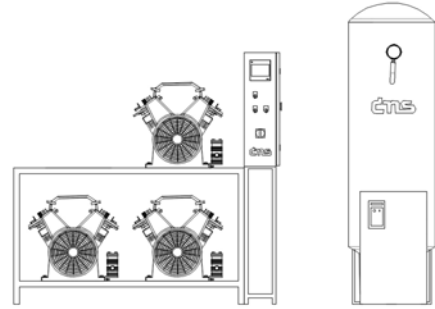


DP 8020-20 3/6-930

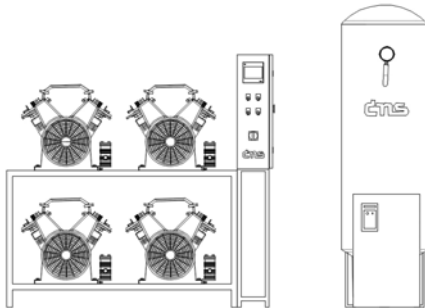

DP 8020-20 4/8-660

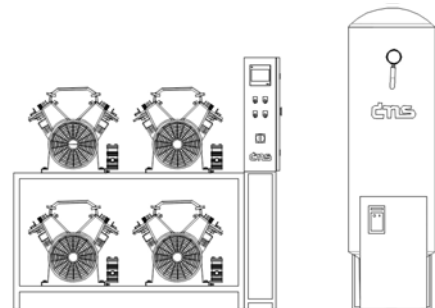

DP 8020-20 4/8-930

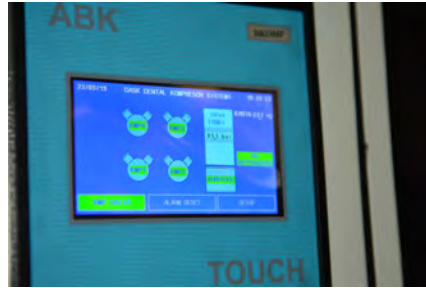

ENDÜSTRİ 4.0

Uyumlu Merkezi Dental Kompresör Sistemi.



Web tabanlı olarak bilgisayardan veya cep telefonundan sistem istenildiği zaman izlenebilir. Ayrıca sistem arıza durumunda işletme teknik personelinin cep telefonuna sms olarak arıza bilgisi gönderebilmektedir. (opsiyonel)

PLC CİHAZ KONTROL ÜNİTESİ

Kompresör motorlarının çalışma basınçlarını, eş yaşlandırma programlamasını, bakım ve arıza tespitlerini düzenleyen otomasyon sistemi eş yaşlandırma sisteminde motorların çalışma saatleri birbirleri ile eşit olması, daha az ısınması ve yıpranmaması amaçlanmıştır.

GÖRÜNTÜLEME EKRANI:

Tüm istasyonları aynı ekran üzerinde takip etmeye yarar. Ekran üzerinde motor çalışma saatleri, tank basıncı, servis uyarıları, hata mesajları, ortam ısısı görüntülenebilmektedir.



DMS

DİŞ HEKİMLİĞİ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. KOLL. ŞTİ
DİZDARİYE MAHALLESİ TEYYARECİ FETHİ BEY SOKAK NO:3/B BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
TELEFON: 0212 210 13 34 E-POSTA: bilgi@dmsdental.com.tr
www.dmsdental.com.tr www.dmsteknik.com
www.dmsorg.com